

Defibrylator AED w Poświętnem.

Pierwszy w powiecie automatyczny defibrylator zewnętrzny w Poświętnem.

Gmina Poświętne, jako pierwsza w powiecie białostockim, zakupiła dostępny przez całą dobę, automatyczny defibrylator zewnętrzny. Urządzenie zamontowane zostało na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem.

Z defibrylatora na ścianie remizy może skorzystać każdy. Urządzenie jest pod stałym monitoringiem. Po otwarciu kapsuły z defibrylatorem strażacy otrzymają wiadomość sms o jego użyciu.

Defibrylator AED jest zaprojektowany w taki sposób, aby można z niego skorzystać bez względu na stopień swojej wiedzy medycznej. Nagłe zatrzymanie pracy serca może wystąpić u każdego i bez skutecznej pomocy, może się to okazać śmiertelne. Właśnie dlatego należy działać szybko.

AED poprowadzi osobę udzielającą pomocy przez cały proces resuscytacji, aż do chwili gdy dotrze profesjonalna pomoc medyczna.

Prawidłowo wykonana resuscytacja wraz z użyciem AED w nagłym zatrzymaniu krążenia, zwiększa szanse na przeżycie nawet do 70 %, a czas dojazdu karetki pogotowia do miejscowości Poświętne wynosi 10-15 min.

10.11.2022 r. z udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora zostali przeszkoleni pracownicy urzędu gminy, podległych instytucji oraz strażacy OSP w Poświętnem.

Naczelnik OSP Karol Sienkiewicz apeluje do mieszkańców, aby przekazywali informację o defibrylatorze AED w swoich domach oraz gościom.







INSTRUKCJA UŻYCIA DEFIBRYLATORA

AED PLUS

Jesteś świadkiem utraty przytomności lub zastałeś leżącą, nieprzytomną osobę. Zachowaj spokój. Nie bój się pomóc, AED Plus poprowadzi Cię przez całą akcję za pomocą komunikatów głosowych i tekstowych oraz aktywnych piktogramów. Słuchaj i postępuj zgodnie z poleceniami AED.



ZACHOWAJ SPOKÓJ. SPRAWDŹ REAKCJĘ. POPROŚ O POMOC.

Sprawdź reakcję poszkodowanego: potrząśnij za ramiona, zapytaj, czy wszystko w porządku? Poproś osobę stojącą obok o pomoc.



UDROŹNIJ DRÓGI ODDECHOWE. SPRAWDŹ ODDYCHANIE.

Jeśli osoba nie reaguje, przysuń ucho do ust poszkodowanego, spróbuj przez 10 sekund nasłuchiwać oddechu, poczuć oddech na własnym policzku. Obserwuj, czy porusza się klatka piersiowa.



WEZWIJ POMOC NA NR 999 LUB 112.

Poproś wyznaczoną osobę o wezwanie pomocy oraz przyniesienie defibrylatora AED. Jeżeli jesteś sam, natychmiast wezwij pomoc dzwoniąc pod numer 999 lub 112. Poinformuj dyspozytora pogotowia o dokładnym miejscu zdarzenia, stanie poszkodowanego, jego przybliżonym wieku, ewentualnych obrażeniach. Podaj również swoje dane i wykonuj polecenia dyspozytora. Rozłącz się dopiero wtedy, gdy uzyskasz pozwolenie od dyspozytora, nie wcześniej!



ROZPOCZNIJ REANIMACJĘ.

Jeśli brak oddechu, do czasu przyniesienia AED, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową w trybie 30:2. Wykonaj 30 uciśnień klatki piersiowej na głębokość 5 – 6 cm i z częstotliwością co najmniej 100 / minutę. Następnie wykonaj dwa wdechy ratownicze odchylając głowę poszkodowanego do tyłu, zaciskając płatkę nosa i obejmując jego usta swoimi ustami. Jeżeli nie chcesz, nie możesz, nie potrafisz wykonać wdechów ratowniczych, prowadź tylko ucisk klatki piersiowej. To wystarczy!



WŁĄCZ URZĄDZENIE.

Po włączeniu defibrylator AED Plus automatycznie wykona test sprawności i za pomocą komunikatów poinformuje Cię o gotowości pracy.

POSTĘPUJ ZGODNIE Z POLECENIAMI GŁOSOWYMI I WIZUALNYMI DEFIBRYLATORA.



PODŁĄCZ ELEKTRODY DEFIBRYLATORA DO ODSŁONIĘTEJ KLATKI PIERSIOWEJ PACJENTA.

Otwórz AED Plus podnosząc pokrywkę, rozerwij metalizowaną kopertę z elektrodą wzdłuż perforacji według wskazań czerwonej strzałki. Naklej elektrodę na odsłoniętą klatkę piersiową poszkodowanego zgodnie z instrukcją graficzną, która znajduje się na opakowaniu elektrody.



NIE DOTYKAJ PACJENTA, ANALIZOWANIE.

Urządzenie rozpocznie analizę rytmu serca poszkodowanego, a po kilku sekundach wyda komendę dotyczącą defibrylacji. W tym czasie NIE WOLNO dotykać poszkodowanego!



DEFIBRYLACJA ZALECANA. NIE DOTYKAJ PACJENTA. NACIŚNIJ MIGAJĄCY PRZYCISK DEFIBRYLACJI.

Jeśli zostanie zalecona defibrylacja, wydaj polecenie „ODSUNĄĆ SIĘ!”. Pamiętaj, dla Twojego bezpieczeństwa NIE DOTYKAJ poszkodowanego. Naciśnij migający czerwony przycisk.



ROZPOCZNIJ REANIMACJĘ.

Po wykonaniu defibrylacji natychmiast rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową w trybie 30:2. Defibrylator ma wbudowaną funkcję metronomu, wyznaczającą poprawny rytm ucisków. W celu kontroli poprawności ucisków, obserwuj wyświetlacz urządzenia i wychylający się wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza. Pamiętaj, że właściwą głębokość ucisków uzyskasz dopiero wtedy, kiedy wskaźnik na wyświetlaczu osiąga wyznaczone pole.

Słuchaj komunikatów defibrylatora – jeśli będziesz wykonywał za słabe uciski, urządzenie powie „PRZYCIŚNIJ MOCNIEJ”. Po osiągnięciu właściwej głębokości usłyszysz komendę „DOBRY UCISK”.



ParaMedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żolty 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: paramedica@paramedica.pl
www.paramedica.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone.




DEFIBRYLACJA NIEZALECANA. ROZPOCZNIJ REANIMACJĘ.

Po upływie dwóch minut urządzenie ponownie zacznie analizę rytmu serca poszkodowanego. Pamiętaj, aby w czasie analizowania NIE DOTYKAĆ poszkodowanego! Jeśli defibrylacja nie zostanie zalecona, rozpocznij reanimację. Po kolejnej analizie i decyzji dotyczącej defibrylacji następują kolejne 2 minuty przeznaczone na uciski i wdechy ratownicze. Sekwencję tę wykonuj do zaobserwowania oznak powrotu krążenia i oddechu albo aż do przybycia wykwalifikowanych służb i przejęcia akcji ratunkowej przez ratowników.

Słuchaj i postępuj zgodnie z poleceniami AED

www.AEDplusTY.pl



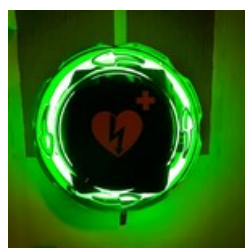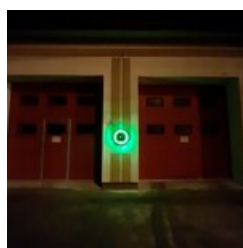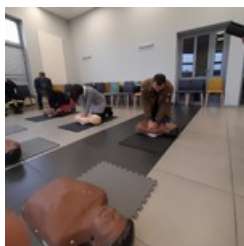

[Defibrylator_AED_Plus_instrukcja_obsługi.pdf](#) | PDF, 539.67 KB |

Dodana: 18 listopad 2022 10:06 Zmodyfikowana: 18 listopad 2022 11:22